

# Tom 2



Новый взгляд на детские кровати

# Преимущества Том 2



Полная  
безопасность



— Максимальный уровень безопасности для маленького пациента

— Веселый дизайн



Пациент

— Кровать с полным электрическим управлением

— Беспрепятственный доступ к пациенту



Персонал

— Превосходный современный дизайн детской кровати

— Настоящий помощник в педиатрии




Управление

# Максимальная безопасность



## ТОРЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

- Обеспечивают всесторонний доступ к пациенту, также предусмотрен вариант поставки для отделения интенсивной терапии.
- Торцы с отделения интенсивной терапии.
- Высокоустойчивая к повреждениям панель.

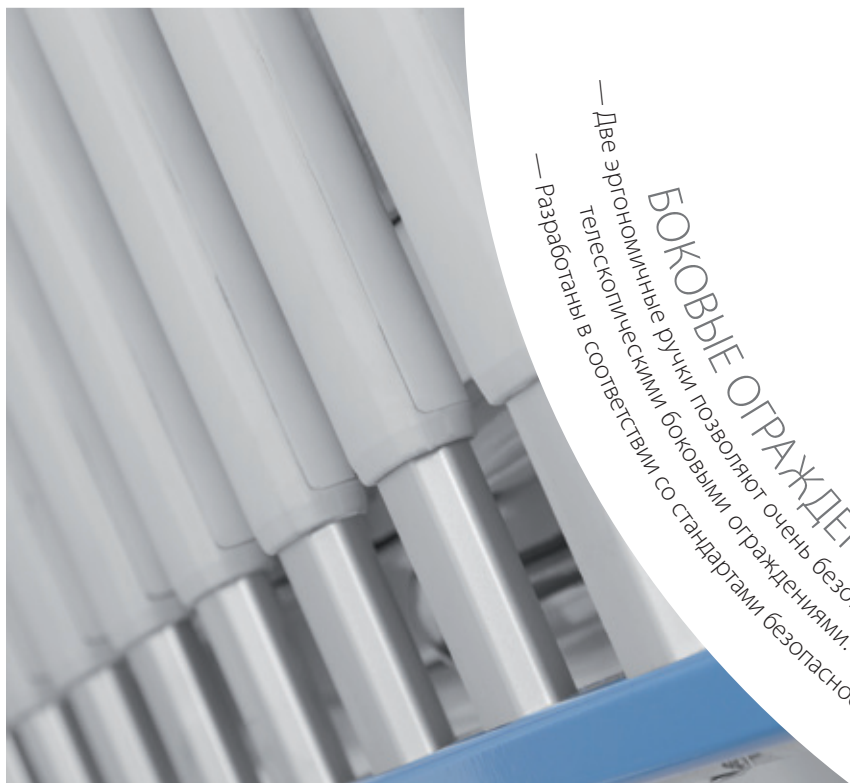

## БОКОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

- Две эргономичные ручки позволяют очень безопасно регулировать телескопическими боковыми ограждениями.
- Разработаны в соответствии со стандартами безопасности.






**ВЕРХНИЙ ПРОТЕКТОР**  
— Инновационная конструкция защитного барьера.  
— Дополнительное обеспечение безопасного пространства для маленьких пациентов.



**АВТОРЕГРЕССИЯ С НУЛЕВЫМ КОНЦЕПТОМ**  
— Позволяет избежать опасного зазора между спинной секцией и торцом за счет плавного движения и смещения секции при регулировании.  
— Сохранены принципы эргономического позиционирования.

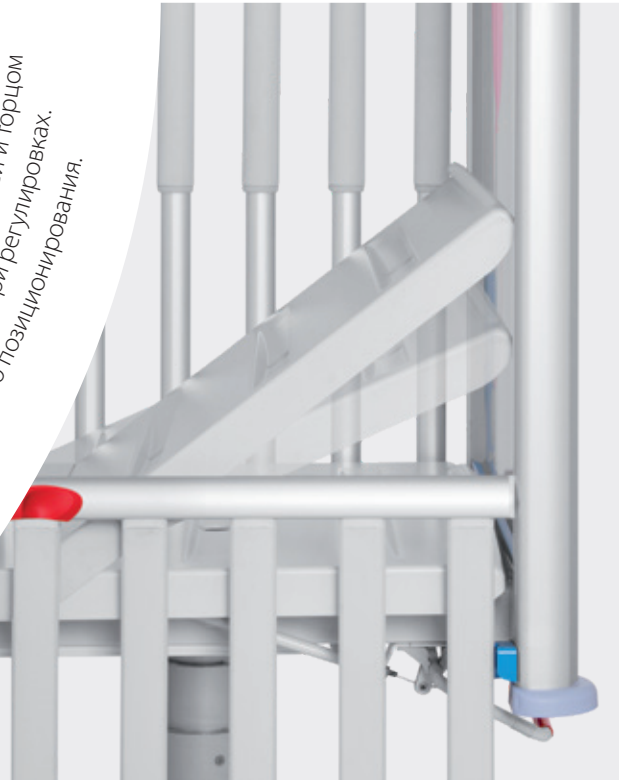

# Привлекательный дизайн





## НЕПОВТОРИМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Торцевые панели детской кровати изготовлены из прозрачных панелей и обеспечивают превосходный обзор для медперсонала. В тоже время маленькие пациенты имеют отличный контакт с окружающим пространством. Пластиковые вставки могут быть декорированы в виде игрушечных мишек, что создает ощущение домашнего пребывания.



— СПОКОЙНЫЕ СНЫ  
— ЧУВСТВО БЕЗОПАСНОСТИ



— ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЗОР

# Чувство домашнего уюта





Чистые линии, современные материалы и яркие цветовые решения кровати Том 2 производят приятное и надежное впечатление на маленьких пациентов и их родителей.



# Простой и удобный доступ



# к ребенку



## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ БОКОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

- Свободный доступ к маленькому пациенту
- 5-ть позиций боковых ограждений



◀ 80<sub>см</sub> **Максимальная БЕЗОПАСНОСТЬ**

◀ Промежуточное положение

◀ 40<sub>см</sub> **Лучший ОБЗОР**

◀ Промежуточное положение

◀ 0<sub>см</sub> **Очень удобный ДОСТУП**

◀ 13<sub>см</sub> Пространство, которое обеспечивает дополнительную безопасность для ног медперсонала и возможность использовать подкатные столики.



**БОКОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С ОТКРЫВАЮЩЕЙСЯ СЕКЦИЕЙ**

для практического использования в педиатрии.

# Функциональность



## РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КРОВАТИ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Новая детская кроватка Том 2 выгодно отличается не только дизайном, но и высокой эргономичностью и функциональностью, позволяя производить все необходимые манипуляции с пациентом. С помощью пульта управления возможна регулировка ложа кровати по высоте, изменение угла наклона спинной секции и угла наклона позиции Тренделенбург/антиТренделенбург. А защитные опции, такие как кнопка безопасности «GO» и «STOP» обеспечивают дополнительную защиту пациентов.

**Удобный**  
ОСМОТР

83<sub>см</sub> ▶

**Безопасный**  
ПОДЪЕМ С КРОВАТИ

58<sub>см</sub> ▶

## КОЛОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Одной из наиболее отличительных особенностей детской кроватки ТОМ 2 является колонная конструкция ее основы, которая обеспечивает высокую стабильность, грузоподъемность, удобную дезинфекцию и сервисное обслуживание.



# Принадлежности и аксессуары

- 1 Ночная подсветка
- 2 4 установочных отверстия для аксессуаров
- 3 Корзинка для принадлежностей и игрушек
- 4 Рельса для аксессуаров
- 5 Встроенный держатель инфузионной стойки
- 6 Центральный тормоз
- 7 Механический СЛР
- 8 Интуитивный пульт управления





## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Источник питания	230 В/±10 %
Максимальный входной ток	1,6 А, 370 ВА
Класс защиты от влаги и пыли	IPX4

## СЕРТИФИКАТЫ

Кровати LINET сертифицированы согласно европейским стандартам и системам качества: ČSN EN 9001:2009, ČSN EN 13485:2012

Кровать Том 2 полностью соответствует новому стандарту для детских больничных кроватей. Конструкция кровати и ее соответствие стандарту DIN 32623: 2009-11 гарантируют идеальную защиту от возможного падения ребенка. Другие стандарты: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внешние габариты:	159,8×83 см
Рекомендуемые размеры матраса	142×70/10 см
Безопасная рабочая нагрузка	75 кг
Регулировка высоты ложа кровати	58 см — 83 см
Наклон Тренделенбурга или Антитренделенбурга (TR/ATR) (с электрорегулировкой)	15°/15°
Высота боковых ограждений над матрасной платформой	80 см
Авторегрессия спинки	11 см
Кол-во секций ложа для матраса	2
Максимальное расстояние между спинной секцией и головным торцом	2,5 см
Вес кровати	120 кг
Клиренс	13 см
Угол наклона спинной секции	40°
Центральная блокировка колесной базы	ДА



# ТОМ 2

Пациент

- Максимальный уровень безопасности для маленького пациента
- Веселый дизайн



- Кровать с полным электрическим управлением
- Беспрепятственный доступ к пациенту



Персонал

Управление

- Превосходный современный дизайн детской кровати
- Настоящий помощник в педиатрической помощи



 wissner-  
bosserhoff

 LINET®

Members of LINET Group

**LINET spol. s r.o.**

Желевчице 5 | 274 01 Сланы | Чешская Республика

Тел.: +420 312 576 400 | Факс: +420 312 522 668 | Эл. почта: [info@linet.com](mailto:info@linet.com) | [www.linetgroup.ru/ru/](http://www.linetgroup.ru/ru/)

